

Техническая спецификация


сухожаровый шкаф SLW 1000 Smart PRO



Представленная выше фотография является только иллюстрацией, на которой показаны дополнительные опции, не включенные в стандартное исполнение. Реальный внешний вид, в частности, цвет и структура материала могут отличаться от представленных на фотографии.

Преимущества контроллера SMART PRO:

- большой сенсорный экран 7 дюймов
- LAN, USB-порты и WiFi для связи и передачи данных
- многосегментные программы времени и температуры
- обзор данных в табличной и графической форме
- визуальная и звуковая сигнализация
- функция администратора для управления
- защищенный паролем вход в систему
- внутренняя память для программ и хранения данных
- реестр событий с уведомлениями пользователей
- программное обеспечение LabDesk и руководство пользователя доступно для скачивания с контроллера

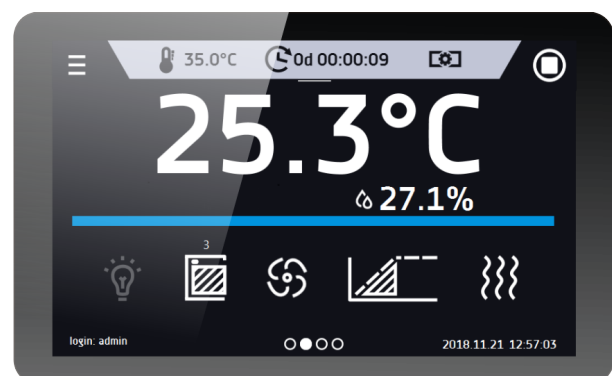

Smart PRO - preview screen

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

циркуляция воздуха	принудительная
объем камеры [Л]	1005
полезный объем камеры [Л]	1005
контроллер	микропроцессорный PID
дисплей	7" цветная сенсорная панель

ТЕМПЕРАТУРА


диапазон температур [°C]	на 5°C выше комнатной температуры... +300°C
регулирование температуры каждый ...[°C]	0,1
стабильность температуры при 105°C [°C]	0,6
равномерность температуры при 105°C [°C]	3
температурная защита от перегрева	класс 3.1 по DIN 12880

КАМЕРА

тип дверцы	сплошная / дверь со смотровым окном (опция)
материал камеры	
Smart PRO	нержавеющая сталь по DIN 1.4301
IG Smart PRO	нержавеющая сталь по DIN 1.4301
материал корпуса	
Smart PRO	стальной лист с порошковой покраской
IG Smart PRO	нержавеющая сталь с льняной структурой

габариты [мм] /1/

ширина A	1260
высота B	2000
глубина C	880
внутренние размеры камеры [мм]	
ширина D	1040
высота E	1610
глубина F	600

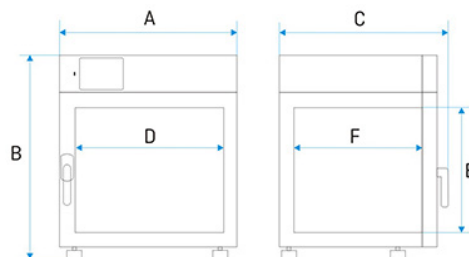

число полок (стандартно макс.)	6 22
усиленная версия полки (PW) [кг] /3/	100
усиленная версия камеры (W) [кг] /4/	300
масса [кг]	330

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

напряжение питания*	400V 50-60Hz
номинальная мощность [Вт]	5500
срок гарантии	24 месяца
изготовитель	POL-EKO-APARATURA

все вышеперечисленные технические данные относятся к изделиям в стандартном исполнении (без дополнительного оборудования)

* - другие источники питания по запросу


1 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового кабеля

2 - при равномерном распределении нагрузки по всей поверхности

3 - усиленная полка

4 - усиленная версия

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

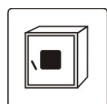

Код заказа: */A


Дверца со смотровым окном



INOX


Код заказа: */P INOX

Проволочная полка из нержавеющей стали

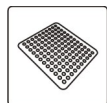

Код заказа: */PP

Перфорированная полка

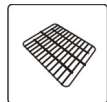

Код заказа: */PW

Усиленная полка




Код заказа: KUW GN*/*

Поддон (кювета) из нержавеющей стали



Код заказа: OWW/LED

Внутреннее освещение

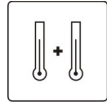

Код заказа: PT 100

Дополнительный датчик температуры



HEPA

Код заказа: HEPA

HEPA-фильтр поступающего воздуха



Код заказа: OCZ/N

Порт доступа для внешнего датчика



Код заказа: IQ/OQ/PQ

Калибровка и квалификация IQ, OQ, PQ



Код заказа: BPP 12

резервная батарея для поддержки работы дисплея



tel. (+48) 32 453 91 70
fax (+48) 32 453 91 85

e-mail: info@pol-eko.com.pl
internet: www.pol-eko.com.pl

POL-EKO-APARATURA SP. J.

A. POŁOK – KOWALSKA, S. KOWALSKI
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. KOKOSZYCKA 172 C



Код заказа: PORT ALARM

Порт тревоги - сигнализация