

Техническая спецификация


Низкотемпературный морозильник ZLN-UT 500 Smart



Представленная выше фотография является только иллюстрацией, на которой показаны дополнительные опции, не включенные в стандартное исполнение. Реальный внешний вид, в частности, цвет и структура материала могут отличаться от представленных на фотографии.

Преимущества контроллера SMART:

- сенсорный экран 4,3 дюйма
- LAN, USB-порты для передачи данных
- многосегментные программы времени и температуры
- визуальная и звуковая сигнализация
- внутренняя память для программ и хранения данных
- реестр событий
- Руководство пользователя доступно для скачивания с контроллера на USB-накопитель
- быстрое изменение параметров программы
- панель сигнализации
- возможность работы с экраном в латексных перчатках

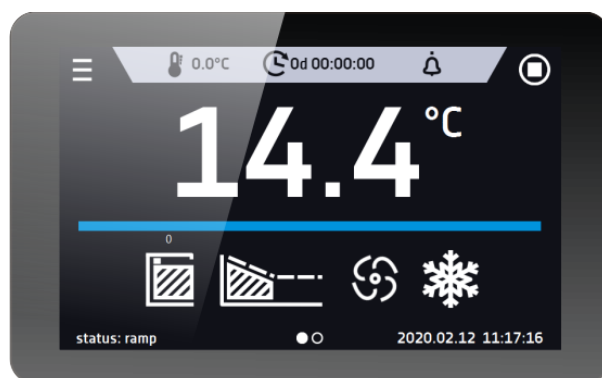

Smart - preview screen

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

циркуляция воздуха	естественная
объем камеры [Л]	483
количество коробок 133x133x50мм (шт.)	352
контроллер	микропроцессорный PID
дисплей	4,3" цветная сенсорная панель

ТЕМПЕРАТУРА

диапазон температур [°C]	-86...-40
регулирование температуры каждый ...[°C]	0,1
время охлаждения от + 20 ° C до -80°C [ч]	3,5
Время нагрева в случае сбоя питания с -80°C до -60°C [ч]	1,5

КАМЕРА

тип дверцы	сплошная
------------	----------

материал камеры

C Smart	нержавеющая сталь по DIN 1.4016
P Smart	нержавеющая сталь по DIN 1.4301

материал корпуса


C Smart	стальной лист с порошковой покраской
P Smart	стальной лист с порошковой покраской

габариты [мм] /1/

ширина A	850
высота B	2010
глубина C	950

внутренние размеры камеры [мм]

ширина D	620
высота E	1380
глубина F	570
высота I	670

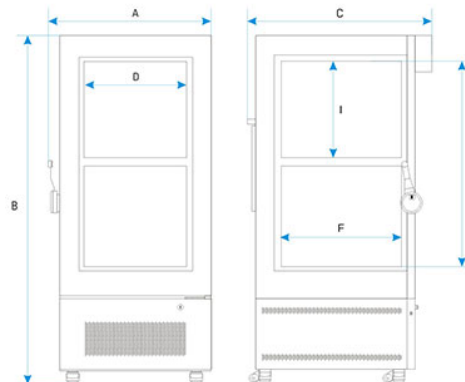

число полок (стандартно макс.)	4 4
макс. нагрузка на одну полку [кг] /2/	10
количество внутренних камер	2
макс. нагрузка оборудования [кг]	80
масса [кг]	200



tel. (+48) 32 453 91 70
fax (+48) 32 453 91 85

e-mail: info@pol-eko.com.pl
internet: www.pol-eko.com.pl

POL-EKO-APARATURA SP. J.

A. POŁOK – KOWALSKA, S. KOWALSKI
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. KOKOSZYCKA 172 C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


напряжение питания*	230V 50-60Hz
номинальная мощность [Вт]	2100
газовый хладагент	R290 / GWP=3 R170 / GWP=6
срок гарантии	24 месяца
изготовитель	POL-EKO-APARATURA

все вышеперечисленные технические данные относятся к изделиям в стандартном исполнении (без дополнительного оборудования)

* - другие источники питания по запросу

1 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового кабеля

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

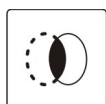

Код заказа: OCZ/N

Порт доступа для внешнего датчика



Код заказа: LabDesk

Программное обеспечение LabDesk